

# WIEDER GUT HÖREN - DANK BEURER HÖRHILFEN

Ob altersbedingt, durch den Beruf oder einen Unfall: Schwerhörigkeit ist ein weit verbreitetes Problem und nimmt naturgemäß mit dem Alter zu. Viele Betroffene merken zwar selbst, wenn das Hörvermögen beeinträchtigt ist, können aber nur schwer akzeptieren, eine Hörhilfe tragen zu müssen. Dabei sind moderne Geräte längst so klein und praktisch, dass sie kaum auffallen.

## AKTIV AM LEBEN TEILNEHMEN

Es gibt keinen Grund, Hörhilfen wegen optischer Hemmnisse oder Scham abzulehnen. Egal ob im Kino, beim Gespräch mit Freunden oder beim Spaziergang im Wald - nehmen Sie endlich wieder aktiv am Leben teil.



## FÜR JEDEN BEDARF DIE PERFEKTE HÖRHILFE

Jede Hörhilfe sollte perfekt zu den individuellen Bedürfnissen des Trägers passen. Ob im Ohr oder hinter dem Ohr platziert, besonders unauffällig oder leicht zu bedienen - Beurer bietet Hörhilfen die optimal zu Ihnen und Ihrem Alltag passen.



### HA 60 Paar - Digitale Hörhilfen

Extra kleine, ergonomische Passform direkt im Gehörgang, kaum sichtbar. Mit je 3 Aufsätzen zur individuellen Anpassung an den Gehörgang. Der Frequenzbereich liegt bei 250-3400 Hz, die Verstärkung bei max. 27 dB und die Spitzenlautstärke bei max. 113 dB. Praktisches 2er Set zur beidseitigen Versorgung.



### HA 70 Paar - Digitale Hörhilfen

Sehr kleine Bauform. Wiederaufladbare Hörhilfen inkl. praktischer Aufbewahrungsbox mit integrierter Powerbank. 2 Programme wählbar für laute und leise Umgebungen. Mit je 4 Aufsätzen zur individuellen Anpassung an den Gehörgang. Der Frequenzbereich liegt bei 250-4000 Hz, die Verstärkung bei max. 33 dB und die Spitzenlautstärke bei max. 122 dB. Praktisches 2er Set zur beidseitigen Versorgung.



### HA 80 Paar und HA 80 Single - Digitale Hörhilfen

Mit wiederaufladbaren Wechselakkus für eine ununterbrochene Nutzung der Hörhilfen. Als praktisches 2er Set zur beidseitigen Versorgung oder auch als Single Variante für den Einsatz im rechten oder linken Ohr erhältlich. 2 unterschiedliche Hörprogramme für laute und leise Umgebungen. Mit 8 bzw. 4 Aufsätzen zur individuellen Anpassung an den Gehörgang. Der Frequenzbereich liegt bei 250-5000 Hz, die Verstärkung bei max. 40 dB und die Spitzenlautstärke bei max. 123 dB.



### HA 85 Paar - Digitale Hörhilfen

Sehr klarer Klang dank RIC-Bauweise. Mit wiederaufladbaren Wechselakkus für eine ununterbrochene Nutzung der Hörhilfen. 2 unterschiedliche Hörprogramme für laute und leise Umgebungen. Mit je 4 Aufsätzen zur individuellen Anpassung an den Gehörgang. Der Frequenzbereich liegt bei 320-6500 Hz, die Verstärkung bei max. 30 dB und die Spitzenlautstärke bei max. 113 dB. Praktisches 2er Set zur beidseitigen Versorgung.



Sie möchten mehr über Hörhilfen und unser gesamtes Sortiment erfahren? Besuchen Sie uns auf unserer Website: [www.beurer.com](http://www.beurer.com)

Beurer GmbH,  
Postfach 1427, 89004 Ulm, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany.  
Tel. +49 731/39 89-0. Fax. +49 731/39 89-139.  
[vertrieb@beurer.de](mailto:vertrieb@beurer.de) [www.beurer.com](http://www.beurer.com)



beurer

Gut hören,  
das Leben  
genießen



Hörhilfen Sortiment  
von Beurer

german  
engineering





## MEHR LEBENSQUALITÄT ERLEBEN!

Die Hörhilfen von Beurer unterstützen Ihr Hörvermögen. Sie verstärken die Lautstärke aller Geräusche in geschlossenen Räumen und im Freien. Die Geräte helfen Ihnen dabei, die Töne und Klänge wieder lauter und deutlicher wahrzunehmen. Und die unauffälligen Wegbegleiter bieten vor allem eines: ein echtes Plus an Lebensqualität.



## FÜR JEDEN BEDARF DIE PERFEKTEN HÖRHILFEN

Sie wünschen sich ...

- ... Hörhilfen mit hohem Tragekomfort?
- ... möglichst unauffällige Helfer?
- ... einen besonders klaren Klang?

Dank der unterschiedlichen Bauformen lassen sich für jeden Bedarf die richtigen Hörhilfen finden:




### IdO-Hörhilfen

**Merkmal: Klein, diskret und fast unsichtbar**

Diese Hörhilfen werden **In-dem-Ohr** (IdO) getragen. Sie gehören zu den kleinsten und unauffälligsten Modellen. Alle Bauteile werden direkt im Gehörgang platziert.

**Vorteil:** Gute akustische Übertragungseigenschaften. Einfaches Einsetzen. Optimal für Brillenträger.

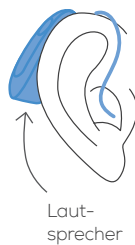


### HdO-Hörhilfen

**Merkmal: Klassisches Modell mit angenehmem Tragekomfort**

Diese Hörhilfen werden **Hinter-dem-Ohr** (HdO) getragen und alle Funktionsbauteile wie z. B. der Lautsprecher sind im Gehäuse verbaut. Der Schall wird per Luftleitung im Kunststoffschlauch an das Ohr übertragen.

**Vorteil:** Durch die Bauform auch für ältere Personen leicht zu bedienen.

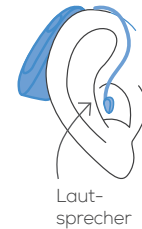

### RIC-Hörhilfen

**Merkmal: Verbesserte Technologie ohne Übertragungsverluste**

Eine Unterform der HdO-Hörhilfen sind RIC-Geräte. Sie werden hinter dem Ohr platziert, aber der Lautsprecher befindet sich direkt im Gehörgang. Dadurch bieten sie einen sehr klaren Klang.

**Vorteil:** Gute akustische Übertragungseigenschaften durch direkte Beschallung im Gehörgang.

## INDIVIDUELLE LÖSUNGEN DURCH VERSCHIEDENE BAUFORMEN

Je länger eine Schwerhörigkeit unbehandelt bleibt, desto ausgeprägter kann der Hörverlust werden. Handeln Sie schnell und genießen Sie dank ausgefeilter Technik ein neues Hörerlebnis! Die Hörhilfen-Kollektion von Beurer besteht aus individuellen Lösungen durch verschiedene Bauformen. Sie entscheiden, welches Modell zu Ihrem Lebensstil passt.

„Wieder mit dabei sein und nichts verpassen!  
Ein Hörverlust muss nicht einschränkend sein.“



## 5 HÖRHILFE-FAKTEN, DIE SIE KENNEN SOLLTEN

**1. Hörhilfen müssen nicht groß, klobig und unansehnlich sein.** Hörhilfen sind längst nicht mehr so unhandlich wie früher. Moderne Hörhilfen sind diskret, leicht zu benutzen und sogar stylish.

**2. Hörhilfen sorgen nicht für eine Verschlechterung des Gehörs.**

Schlecht hörende ohne Hörhilfen leiden unter einer Hörentwöhnung. Es kommt mit der Zeit zu einer Rückbildung des Hörnervs und die Weiterleitung an das Gehirn wird immer schlechter.

**3. Es gibt für jeden passende Hörhilfen.**

Die Betroffenen sollten nicht nach dem Preis entscheiden, sondern danach, mit welchem Gerät Sie im Alltag am besten zurechtkommen. Hörhilfen sollten an den individuellen Anspruch angepasst sein und ein bestmögliches Hörerlebnis schaffen.

**4. Altersschwerhörigkeit betrifft in der Regel beide Ohren.**

Schwerhörigkeit kann unterschiedliche Ursachen haben, z.B. dauerhafte Lärmbelastung, Krankheit oder einen Unfall. In manchen Fällen ist tatsächlich nur ein Ohr betroffen. Bei Altersschwerhörigkeit hingegen sollten in der Regel beide Ohren behandelt werden. Nur durch beidseitiges Hören können Sie die Richtung von Geräuschen exakt erfassen, zum Beispiel von einem fahrenden Auto.

**5. Wer gut hört, kann selbstbewusst auftreten.**

Unser Alltag ist heute mehr denn je von Kommunikation geprägt. Wer gut hört, kann sich ohne Scheu an Gesprächen beteiligen. Die Möglichkeit, sich auszutauschen und klar zu verstehen stärkt das Selbstvertrauen.



## DIE RICHTIGE PFLEGE FÜR EINEN LANGEN TRAGEKOMFORT

Für ein möglichst langes Hörvergnügen mit Hörhilfen spielt die Pflege eine wichtige Rolle. Beurer bietet für die verschiedenen Modelle die passenden Pflegeprodukte an.

**1. Trocknungskapseln** für IdO-, HdO- und RIC-Hörhilfen. Feuchtigkeit kann jedem Hörgerät schaden. Um dies zu vermeiden eignet sich der Einsatz einer Trocknungskapsel. Mit Hilfe des Farbwechsels kann das Ende der Trocknungsleistung erkannt werden.

**2. Cerumenfilter** für IdO- und RIC-Hörhilfen. Diese Hörgeräte sind mit speziellen Cerumenfiltern ausgestattet, die vor Ohrenschmalz, Verschmutzung und Feuchtigkeit schützen. Sie sollten regelmäßig ausgetauscht werden.